


PL-SS500D DIGITAL STIRRER · TIMING BELT

01 사용 방법

OPERATING

1. 평평한 곳에 각 조임쇠 부분을 단단히 고정하여 기기를 설치합니다.
2. 전원을 연결하기 전에 전원 스위치를 끄고 속도조절을 **최저**로 합니다.
3. 입력 전원(AC 220V 50/60Hz)을 확인한 후 전원을 연결합니다.
4. 실험 전 조작을 마친 후 전원 스위치를 켜고 속도를 **천천히** 올립니다.
※ 급격한 속도 증가는 기계에 무리를 주며, 고장의 원인이 됩니다.
5. 작업 후 속도를 최저로 한 뒤 전원 스위치를 끕니다.

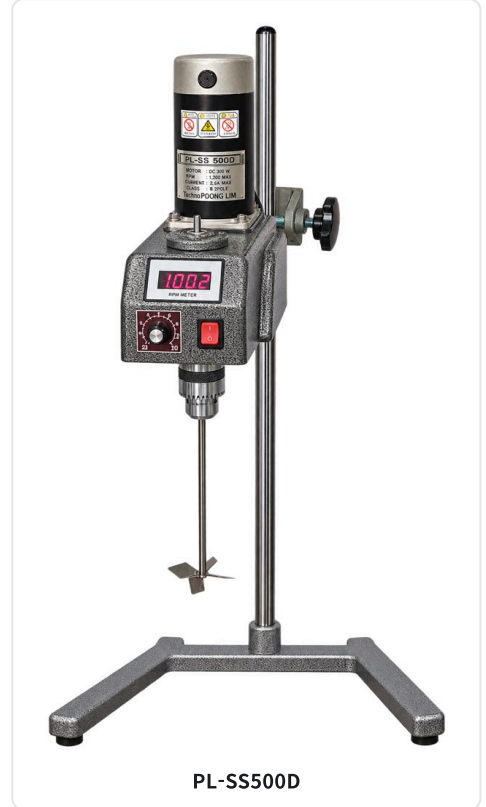

PL-SS500D

⚠ 주의사항

CAUTION

- 본 기기는 **중점도 및 고점도 용액** 교반을 목적으로 제작되었습니다.
- 타이밍 벨트를 채용해 안정된 속도와 정숙성을 높였으나, 무리한 사용과 장시간 운전으로 모터에 과부하가 생길 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 시 반드시 **정격 퓨즈(250V 3A)**를 사용하십시오. 퓨즈는 전원코드 아래 **사각 서랍**을 앞으로 당겨 교환합니다.